

患者ID:_____

調剤薬局名:_____

指導を受けた方:
☐ご本人 ☐ご家族 ☐その他

担当薬剤師名:_____先生

FAX送信先：横浜労災病院薬剤部

FAX: 045-474-8024 TEL: 045-474-8111

商品名:_____用法用量:_____

_____病院 _____科 _____医師

指導日： _____年 _____月 _____日

★の項目が指導後も×の場合は、治療継続不可とします。			指導前	指導後
準備		キャップを回して外すことができる。	○・×	○・×
		カウンターで残量を確認できる。	○・×	○・×
		吸入器をまっすぐに立て、回転グリップ部分だけを持ち右方向に止まるまで回すことができる。	○・×	○・×
		その後左方向にカチッと音が鳴るまで回すことができる。	○・×	○・×
吸入		持っているときに通気口を塞いでいない。	○・×	○・×
		吸入前の息吐きができる。	○・×	○・×
	★	ホイッスルが鳴る。（吸入に必要な吸気流速がある。）	○・×	○・×
		5秒間の息止めができる。	○・×	○・×
		吸入後の息吐きができる。	○・×	○・×
片付け		キャップを閉める前にマウスピースをふき取る。	○・×	○・×
		使用後はキャップを閉める。	○・×	○・×
うがい		うがいができる。	○・×	○・×
		うがいの必要性を理解している。	○・×	○・×

◆ 使用中または今回使用を追加した補助器具にチェック☑して下さい。

☐練習用プラセボ吸入器 ☐練習用トレーナー（笛） ☐専用グリップサポーター

☐吸入確認用ハンカチ

◆ 症状の評価（☐A C T/☐mM R C ※使用した方に☑して下さい。） 結果_____

◆ 残薬:_____吸入（使用済みデバイス_____個）

◆ 副作用の出現：なし・あり（口渇・頻尿・嘔声・口腔内違和感・その他_____）

◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可

⇒不可理由（デバイス変更は一覧[H P 参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。）

◆ 特記事項

（指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。）

タービュヘイラー 各部位の名称
(薬品名: パルミコート、シムビコート、オーキシス)



“0”が小窓の中央に表示されると 終了



※色・目盛りの数字はそれぞれ異なります

タービュヘイラーの初回準備方法
(薬品名: シムビコート・パルミコート・オーキシス)

※ 新しい吸入器は空打ちを行って下さい

空打ち

- キャップを回して外します
- 吸入器をまっすぐに立て、色付きの回転グリップを左右に回してカチッと3回鳴らします。
(3回目にカチッと鳴らしたところで、止めて下さい)




タービュヘイラーの吸入手順（患者さん用）

【薬品名：オーキシス、シムビコート、パルミコート】

※ 残量が少ないときは早めに新しいものを処方してもらって下さい。

①薬の準備

- キャップを回して外します。
- カウンターで残量を確認します。
- 吸入器をまっすぐに立て、色つきの回転グリップを、クルッと右方向に確実に止まるまで回します
- 止まったら逆方向（左）に、カチッと音がするまで戻します

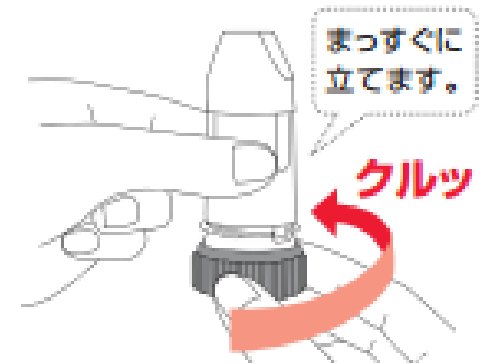

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
（吸入口には息を吹きかけないで下さい。）



③吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。



④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
（吸入口には息を吹きかけないで下さい）

⑥片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります。
- 使用後はキャップを閉めます。

※もう1度吸入をする場合

⑦うがい

- 吸入後は、必ずうがい（ガラガラ・ブクブク）を各3回します。

タービュヘイラー 各部位の名称
(薬品名: パルミコート、シムビコート、オーキシス)



“0”が小窓の中央に表示されると 終了



※色・目盛りの数字はそれぞれ異なります

タービュヘイラーの初回準備方法
(薬品名: シムビコート・パルミコート・オーキシス)

※ 新しい吸入器は空打ちを行って下さい

空打ち

- キャップを回して外します
- 吸入器をまっすぐに立て、色付きの回転グリップを左右に回してカチッと3回鳴らします。
(3回目にカチッと鳴らしたところで、止めて下さい)



初回のみ必要な操作です。
毎回行わないように指導します。

吸入しない時にグリップを 左右に回すと、カウンターが進んでしまいます。

タービュヘイラーの吸入手順(薬剤師用)

【薬品名:オーキシス、シムビコート、オアルミコート】

※ 吸入操作練習用具(笛付)でホイッスル音の確認をします。
※ 操作はカウンターを上にして、すべて水平に行ってください。

