

初回

レスピマツト吸入指導報告書

Ver.20180601改定

患者ID:\_\_\_\_\_

調剤薬局名:\_\_\_\_\_

指導を受けた方:  
☐ご本人 ☐ご家族 ☐その他

担当薬剤師名:\_\_\_\_\_先生

FAX送信先：横浜労災病院薬剤部

指導日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

FAX: 045-474-8024 TEL: 045-474-8111

商品名:\_\_\_\_\_用法用量:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_病院\_\_\_\_\_科\_\_\_\_\_医師

|      |                                      |                          |
|------|--------------------------------------|--------------------------|
| 薬の準備 | 目盛りで残量を確認できる。                        | <input type="checkbox"/> |
|      | 透明ケースをカチッと音がするまで180度回転する。            | <input type="checkbox"/> |
|      | キャップを完全に開ける。                         | <input type="checkbox"/> |
| 吸入   | 吸入前の息吐きができる。                         | <input type="checkbox"/> |
|      | 吸入口をくわえ、噴霧ボタンを押すと同時に2秒以上かけてゆっくり吸い込む。 | <input type="checkbox"/> |
|      | 5秒間の息止めができる。                         | <input type="checkbox"/> |
|      | 吸入後の息吐きができる。                         | <input type="checkbox"/> |
| 片付け  | マウスピースをふき取る。                         | <input type="checkbox"/> |
|      | 使用後はキャップを閉める。                        | <input type="checkbox"/> |
| うがい  | うがいができる。                             | <input type="checkbox"/> |
|      | うがいの必要性を理解している。                      | <input type="checkbox"/> |
| 残薬確認 | 次回受診日に吸入薬のデバイスを持参するように説明する。          | <input type="checkbox"/> |


◆ 使用中または今回使用を追加した補助器具にチェック☑して下さい。  
☐練習用プラセボ吸入器 ☐回転キット

◆ 症状の評価（☐A C T/☐mM R C ※使用した方に☑して下さい。）結果\_\_\_\_\_

◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可  
⇒不可理由（デバイス変更は一覧[HP参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。）

◆ 特記事項  
(指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。)

## レスピマツト 各部位の名称 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)

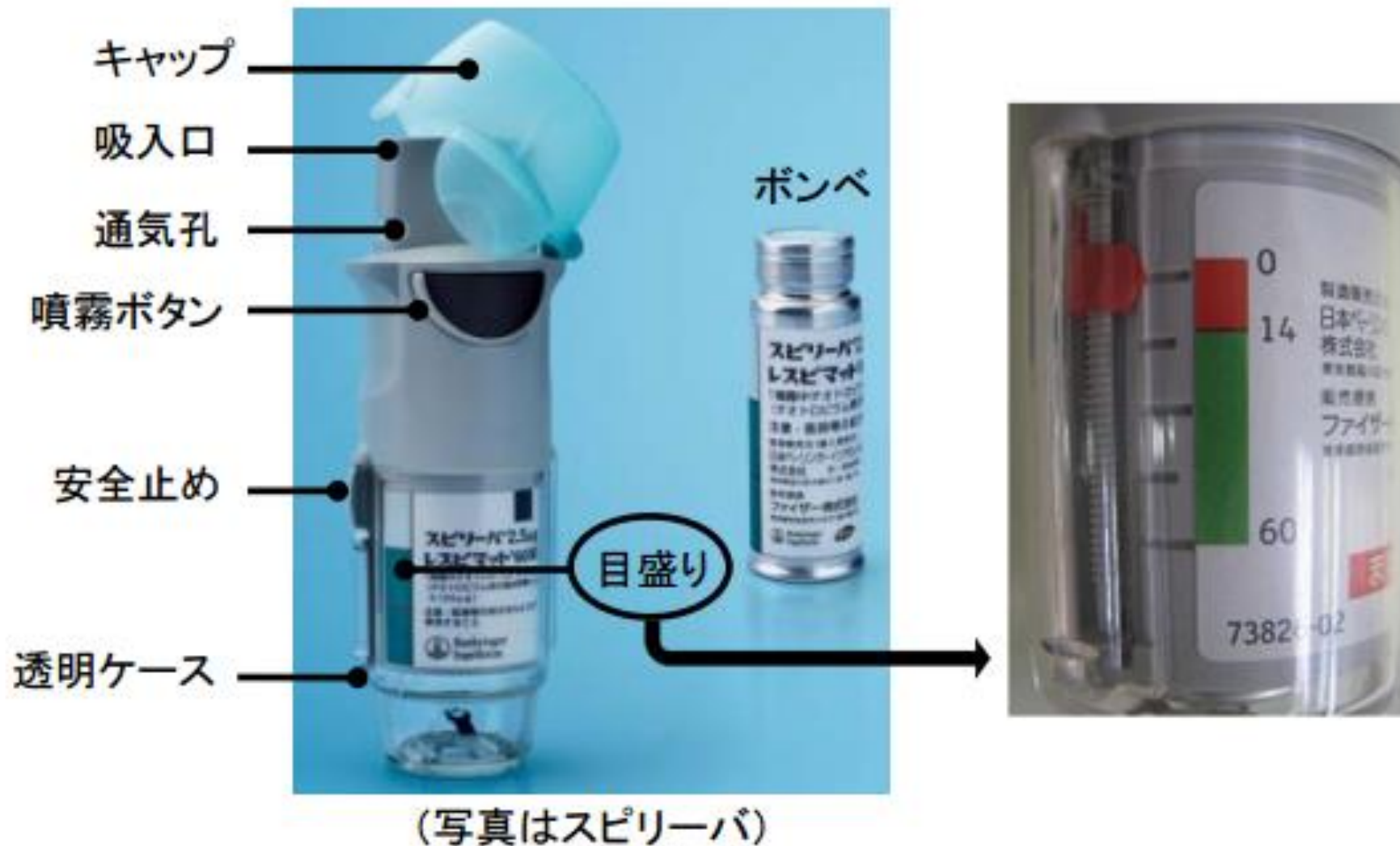

## レスピマツトの初回準備方法 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)

※ 新しい吸入器はテスト噴霧を4回繰り返して下さい <5回目から吸入可能>

### ポンベ装着

- ☐ キャップを閉じた状態で、安全止めを押しながら、透明ケースを外します
- ☐ ポンベ上部の緑色の部分を器具に挿入します
- ☐ ポンベをかたい平面の上でゆっくり押し込んで、カチッと音がするまで挿入します
- ☐ 外しておいた透明ケースを装着します



### テスト噴霧(4回)

- ☐ キャップを閉じた状態で上向きにしてもち、透明ケースを青い矢印の方向にカチッと音がするまで180度回転させます (A)
- ☐ キャップを完全に開けます (B)
- ☐ 吸入口を下に向け噴霧ボタンを押し、ミスト(霧)が見えるのを確認します(薬が目に入らないように注意)
- ☐ キャップを閉じます




## レスピマツトの吸入手順(患者さん用) 【薬品名:スピリーバ、スピオルト】

※ 残量が少ないときは早めに新しいものを処方してもらってください。





## レスピマツト 各部位の名称 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)

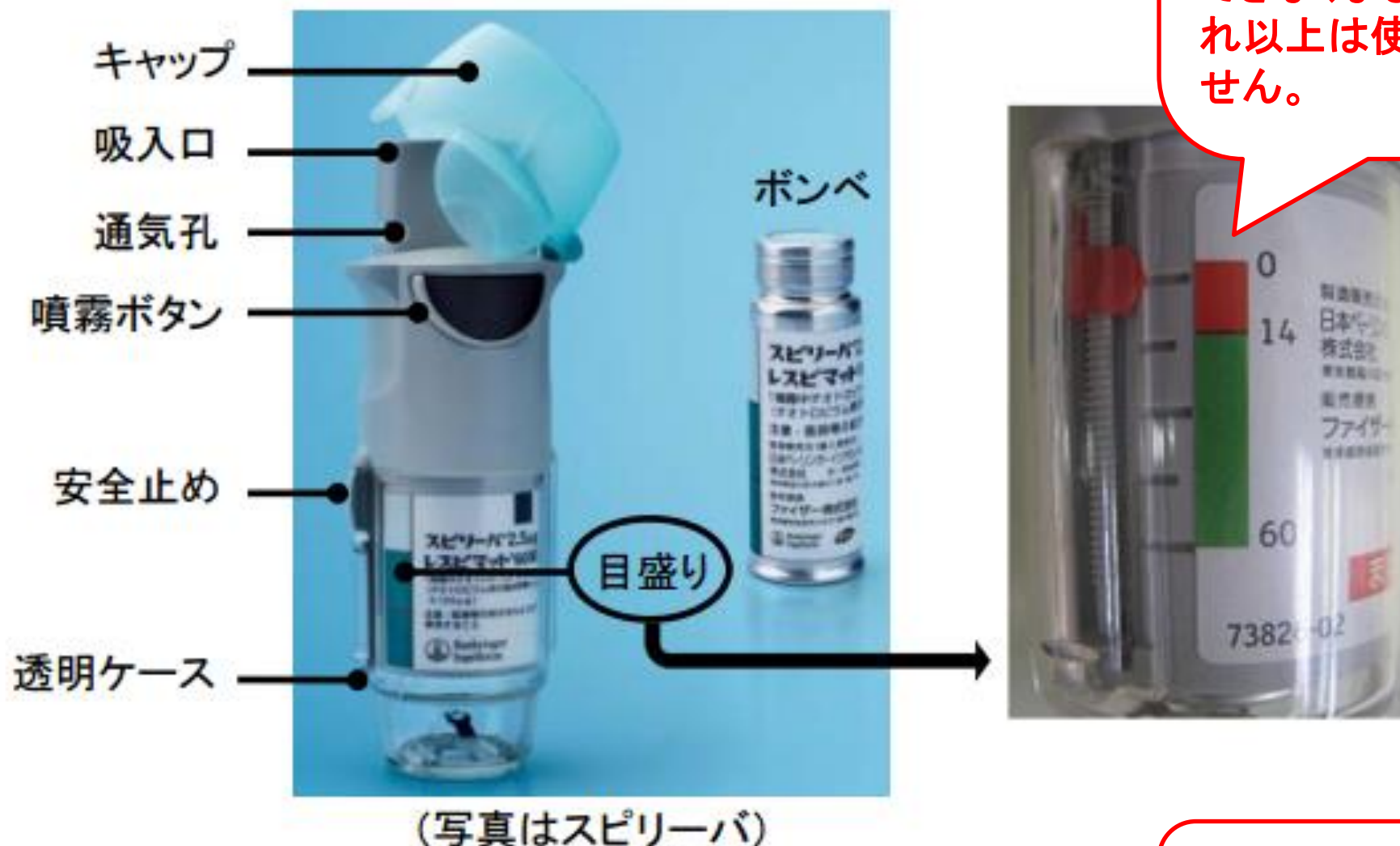

目盛りは、おおよその残りの噴霧回数を示します。ロックがかかり、透明ケースを回転させることができなくなると、それ以上は使用できません。

## レスピマツトの初回準備方法 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)

※ 新しい吸入器はテスト噴霧を4回繰り返して下さい <5回目から吸入可能>

テスト噴霧をしても30回分(計60噴霧)吸入が可能です。

### ポンベ装着

- キャップを閉じた状態で、安全止めを押しながら、透明ケースを外します
- ポンベ上部の緑色の部分を器具に挿入します
- ポンベをかたい平面の上でゆっくり押し込んで、カチッと音がするまで挿入します
- 外しておいた透明ケースを装着します

・確実に挿入しないと噴霧異常の原因になります。  
・長期処方の場合、処方時3本まで装着して渡しても大丈夫です。

### テスト噴霧(4回)

- キャップを閉じた状態で上向きにしてもち、透明ケースを青い矢印の方向にカチッと音がするまで180度回転させます (A)
- キャップを完全に開けます (B)
- 吸入口を下に向け噴霧ボタンを押し、ミスト(霧)が見えるのを確認します(薬が目に入らないように注意)
- キャップを閉じます



## レスピマツトの吸入手順(薬剤師用) 【薬品名:スピオルト、スピリーバ】

