

継続

ロタディスク吸入指導報告書

Ver.20180601改定

患者ID: _____

_____ 病院 _____ 科 _____ 医師

調剤薬局名: _____

指導を受けた方: _____ 先生

☐ご本人 ☐ご家族 ☐その他

担当薬剤師名: _____

指導日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

FAX送信先：横浜労災病院薬剤部
FAX: 045-474-8024 TEL: 045-474-8111

商品名: _____

用法用量: _____

★の項目が指導後も×の場合は、治療継続不可とします。			指導前	指導後
準備		カバーを外す。	○・×	○・×
		目盛りで残量を確認できる。	○・×	○・×
		フタを垂直になるまで立て、再び閉じる。	○・×	○・×
吸入		吸入前の息吐きができる。	○・×	○・×
	★	吸入口を加え、深く息を吸い込む。 (吸入口をくわえすぎると通気口を塞いでしまうので注意)	○・×	○・×
		5秒間の息止めができる。	○・×	○・×
		吸入後の息吐きができる。	○・×	○・×
片付け		マウスピースをふき取る。	○・×	○・×
		使用後はディスクを回転させ、残回数を表示してからキャップを閉める。	○・×	○・×
うがい		うがいができる。	○・×	○・×
		うがいの必要性を理解している。	○・×	○・×

◆ 症状の評価（☐ACT/☐mMRC ※使用した方に☑して下さい。） 結果 _____

◆ 残薬: _____ 吸入（使用済みデバイス _____ 個）


◆ 副作用の出現：なし・あり（口渇・頻尿・嘔声・口腔内違和感・その他 _____）

◆ このデバイスを使用した治療は継続可能ですか。 可能・不可

⇒不可理由（デバイス変更は一覧[H P 参照]から同一用量のデバイスを選択し電話にて疑義照会してください。）

◆ 特記事項
(指導が実施できなかった場合など、トラブルや不備があればそちらも記載して下さい。)

ロタディスク 各部位の名称
(薬品名: セレベント、フルタイド)

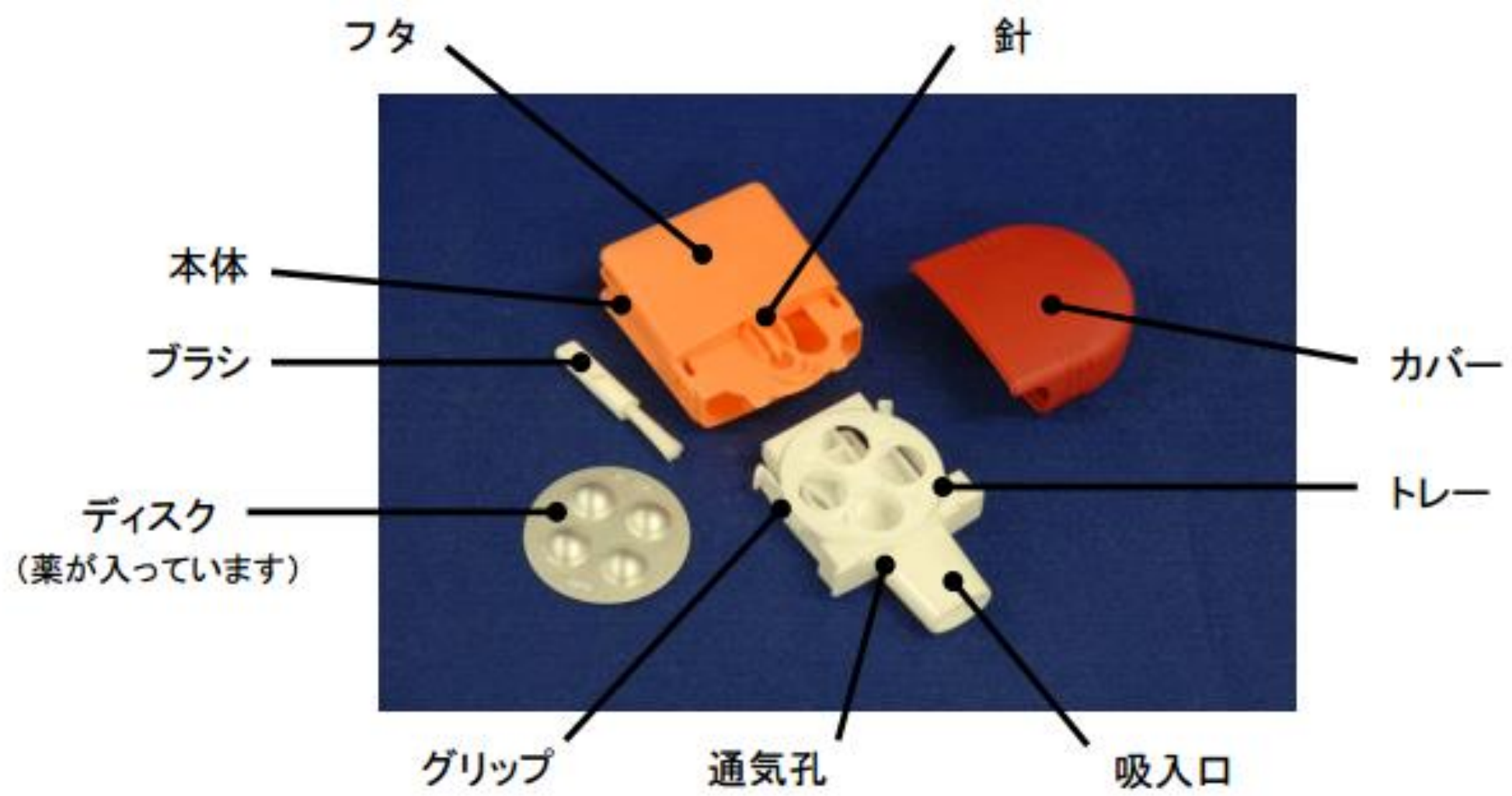

ロタディスクのディスク装着方法
(薬品名: セレベント、フルタイド)

※ 1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残り回数です)



ディスク
操作
方法

- カバーを外します (A)
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出します (B)
- トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します (C)
- トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます (D)
- ディスクをのせたトレーを本体にカチッと音がするまで押し戻します (E)
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します (F)
- ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に“4”を表示させます (G)



ロタディスクの吸入手順（患者さん用） 【薬品名：セレベント、フルタイド】

- ※ 操作はフタを上にして、すべて水平に行ってください。
- ※ ディスク装着方法は1枚目（1/2）を参照。

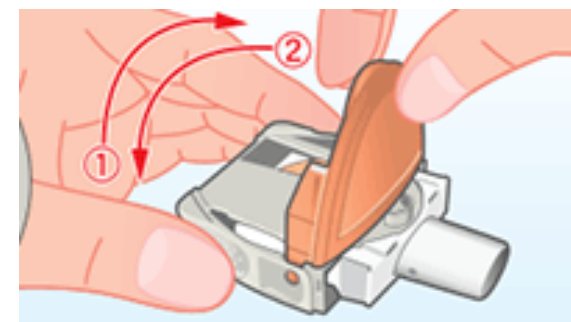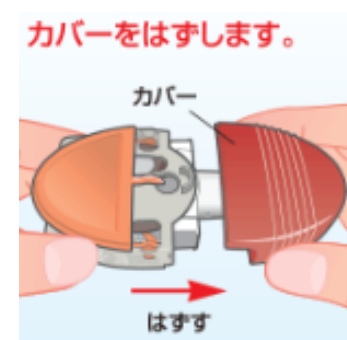

① 薬の準備

- カバーを外します
- 表示窓で残量を確認します
- フタを垂直になるまで立て、再び閉じます
(ディスクに針が貫通し、薬を吸入できる状態になります)

② 息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐きだします。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい。)



③ 吸入

- 吸入口を加え、深く息を吸い込みます。
(吸入口をくわえすぎると、通気孔を塞いでしまうので注意)



④ 息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます。


⑤ 息吐き

- 息をゆっくり吐き出します。
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

⑥ 片付け

- マウスピースを乾いた清潔な布やティッシュでふき取ります□
使用後はディスクを回転させ、残りの回数を表示してから
カバーをします。

薬(ディスク)を回転
させます。

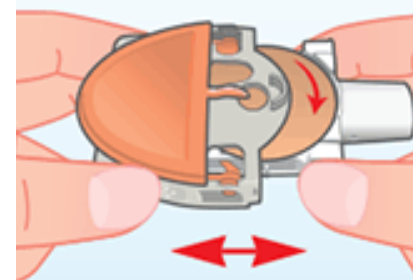


※もう1度吸入をする場合

⑦ うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します。




ロタディスク 各部位の名称
(薬品名: セレベント、フルタイド)

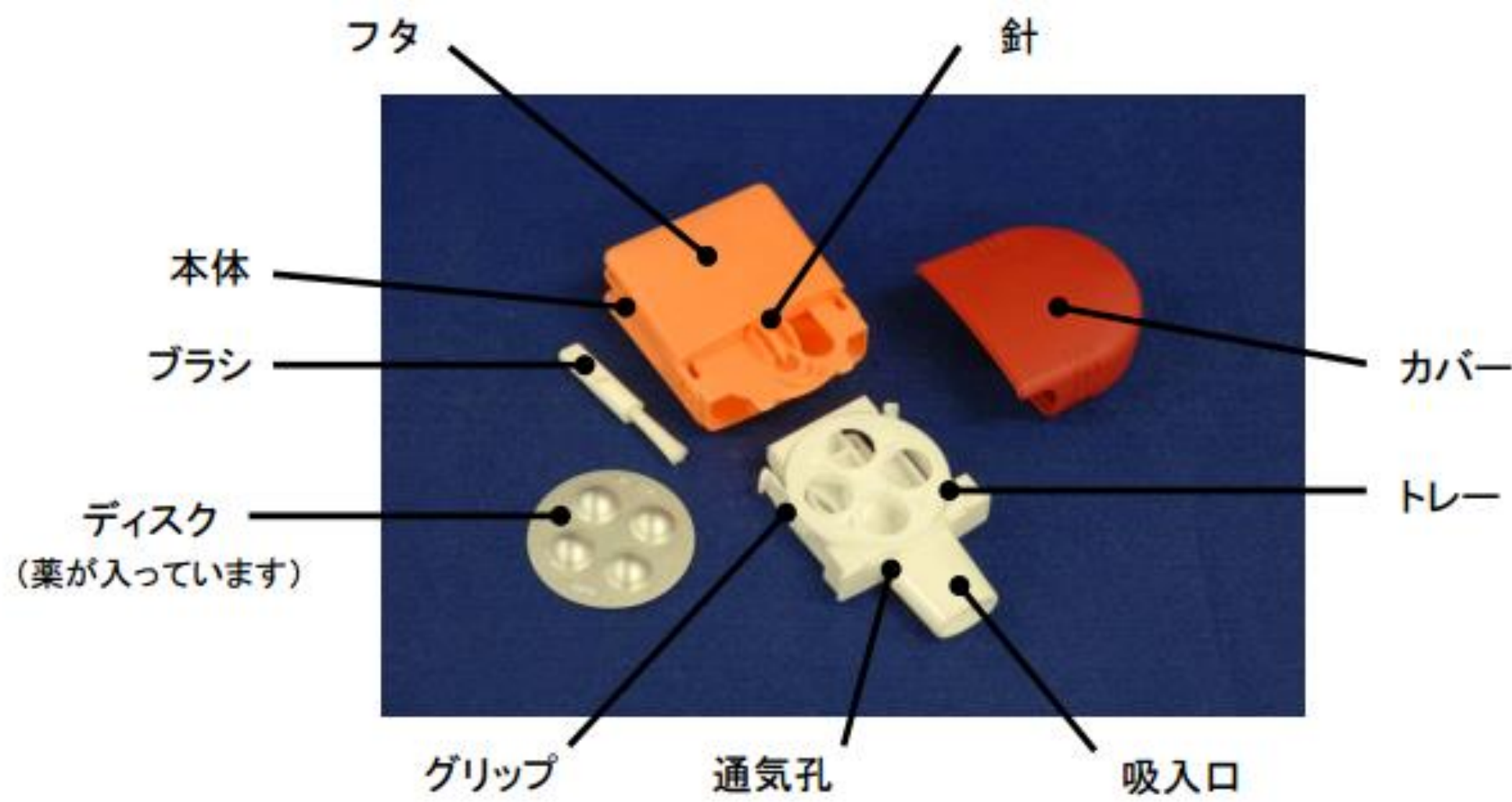

ロタディスクのディスク装着方法
(薬品名: セレベント、フルタイド)

※ 1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残り回数です)

ディスク 操作 方法	☐ カバーを外します (A)
	☐ トレーの両端を持って止まるまで引き出します (B)
	☐ トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します (C)
	☐ トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます (D)
	☐ ディスクをのせたトレーを本体にカチッと音がするまで押し戻します (E)
	☐ トレーの両端を持って止まるまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します (F)
	☐ ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に“4”を表示させます (G)

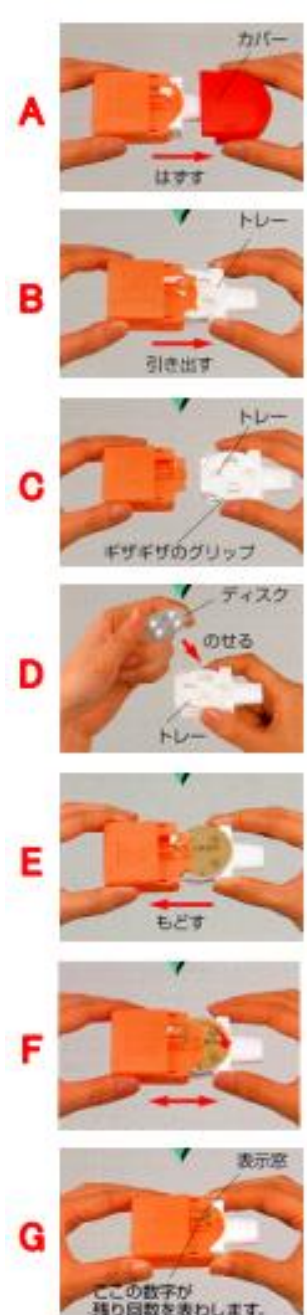

ロタディスクの吸入手順(薬剤師用) 【薬品名:セレベント、フルタイド】

※ 操作はフタを上にして、すべて水平に行ってください。
※ ディスク装着方法は1枚目(1/2)を参照。

